

[www.acteongroup.com](http://www.acteongroup.com)

RCS Paris 8337934483 - 0185198

Document non contractuel - Réf. 707211 C - 11/2020 - Copyright © 2020 ACTEON. Tous droits réservés. Aucune information ou partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme que ce soit sans l'autorisation préalable d'ACTEON.

Ce dispositif médical est classé IIb selon la Directive Européenne applicable en vigueur. Il porte le marquage CE. Organisme notifié : IMQ - CE 0051. Ce dispositif médical pour soins dentaires est réservé aux personnels de santé ; il n'est pas remboursé par les organismes d'assurance maladie. Ce matériel a été conçu et fabriqué selon un système d'assurance qualité certifié EN ISO 13485. Lire attentivement le manuel d'utilisation disponible sur [www.acteongroup.com](http://www.acteongroup.com). Fabricant: de Götzen. Distributeur: groupe ACTEON®. Date de mise à jour/création: 2020

DE GOTZEN UNE SOCIÉTÉ DU GROUPE ACTEON  
VIA ROMA 45 21057 OLGiate OLONA VA ITALIAE  
TÉLÉPHONE + 39 0331 376760 FAX + 39 0331 376763  
COURRIER ÉLECTRONIQUE : [INFO@.ACTEONGROUP.COM](mailto:INFO@.ACTEONGROUP.COM) [WWW.ACTEONGROUP.COM](http://WWW.ACTEONGROUP.COM)

**ACTEON**

FR

# IT'S TIME FOR EFFICIENT PANORAMIC X-RAYS\*

\*Il est temps de faire des radios panoramiques efficaces

## X MIND prime



**ACTEON**

# LE DIAGNOSTIC 2D PLUS ACCESSIBLE QUE JAMAIS GRÂCE À UNE SOLUTION INTELLIGENTE ET COMPACTE



ACTEON

INNOVATIVE  
IMAGING

**X-MIND® prime**  
est une solution intelligente qui  
réunit capacités technologiques  
de pointe et simplicité d'utilisation.

**Cet appareil ingénieux** offre  
tous les outils de diagnostic  
essentiels dans un produit  
accessible.

Diagnostic 2D  
simple

Positionnement  
simple

Interface  
utilisateur  
simple

Installation  
simple

Utilisation  
Simple



# GÉNÉREZ UN BILAN CLINIQUE COMPLET

## RÉALISEZ UN CONTRÔLE COMPLET AVEC DES IMAGES DE HAUTE QUALITÉ

## SUIVEZ VOS TRAITEMENTS ET COMMUNIQUEZ EFFICACEMENT AVEC VOS PATIENTS



*Caries interproximales sur les dents 21 et 22. Traitement endodontique et lésion apicale sur la dent 47.*



*Position des dents de sagesse.*

Avec X-MIND® prime, bénéficiez :

- D'un examen panoramique précis
- D'une meilleure communication avec les patients
- D'un temps de préparation des examens minime
- D'une image nette dès le premier cliché



*Vérification du positionnement de l'implant immédiatement après l'intervention chirurgicale.*



*Vérification du traitement endodontique réalisé sur la dent 47.*

# UN VASTE CHOIX D'EXAMENS PANORAMIQUES


X-MIND® prime offre un éventail complet d'examens panoramiques conçu pour répondre à toutes vos applications cliniques.

Il propose tous les examens panoramiques nécessaires pour la dentisterie générale : imagerie panoramique des dents, articulations temporo-mandibulaires, sinus.




## IMAGERIE PANORAMIQUE DES DENTS

Visualisation complète de la mandibule et du maxillaire, des sinus maxillaires, des articulations temporo-mandibulaires et des structures de soutien.

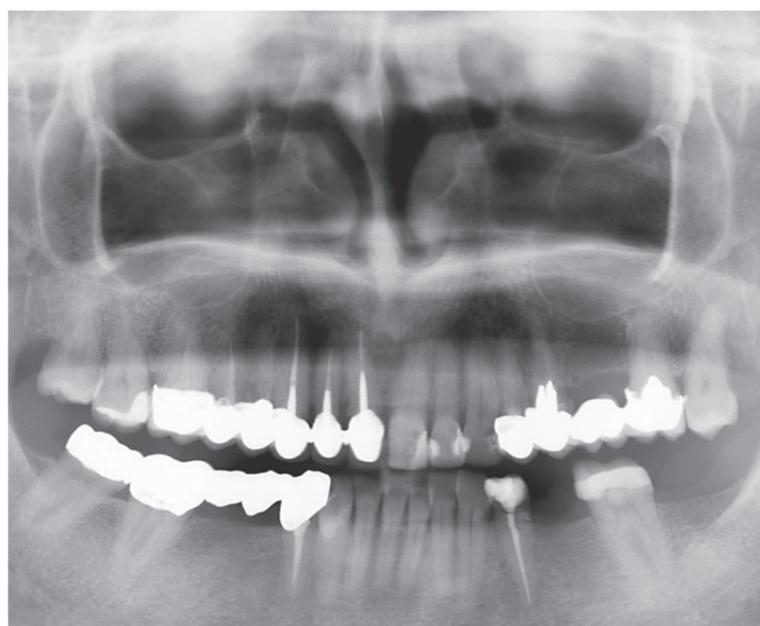

## SINUS MAXILLAIRES

Augmentation du contraste pour améliorer la visibilité des sinus et des apex des dents supérieures.

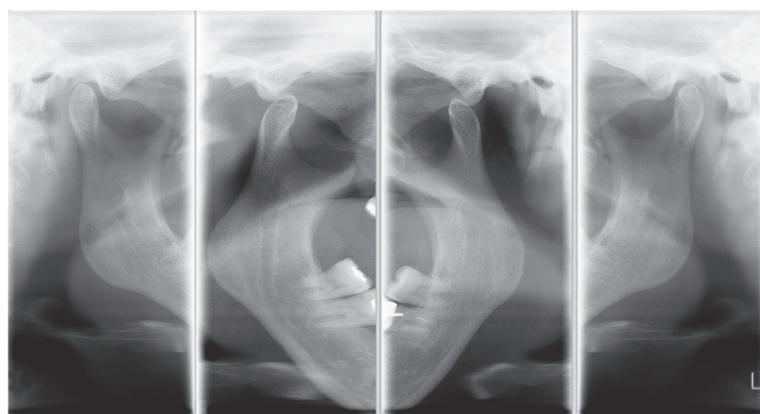


## ARTICULATION TEMPOROMANDIBULAIRE

L'examen peut se faire bouche ouverte ou bouche fermée.

## PLUSIEURS EXAMENS PANORAMIQUES ADULTES ET PÉDIATRIQUES

- ▶ Panoramique Standard
- ▶ Semi-panoramique (droite/gauche)
- ▶ Dentition frontale
- ▶ Faible dose
- ▶ Radiologie orthodontique
- ▶ Interproximal Simple (droite/gauche)
- ▶ Bilatéral
- ▶ Sinus
- ▶ ATM Standard
- ▶ En une seule phase

D'autres programmes spécifiques sont disponibles, tels que semipanoramique, panoramique à orthogonalité optimisée, dentition frontale détaillée et la panoramique à faible dose et interproximal.

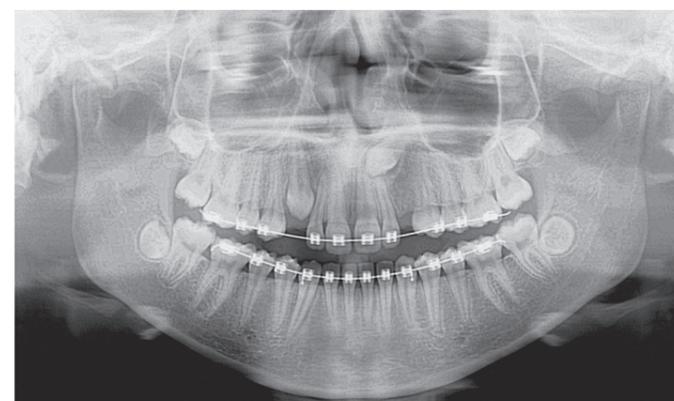

## PANORAMIQUE PÉDIATRIQUE

Protège le patient en réduisant la zone exposée et le temps d'exposition.



## SEMI-PANORAMIQUE

Gauche et droit

Réduit la région exposée et se concentre sur la région d'intérêt.



## INTERPROXIMAL

Gauche et droit

Vues interproximales simples ou bilatérales.



## FRONTALE

Limite l'exposition à la partie frontale des arcades dentaires.




# OPTIMISEZ L'ESPACE AU SEIN DE VOTRE CABINET

## SOLUTION MURALE INTELLIGENTE

La compacité est essentielle. X-MIND® prime fait gagner de la place : grâce à son système de montage mural intelligent, il ne vous encombrera pas.

Son poids exceptionnellement faible (à peine 62 kg) et sa petite taille rendent X-MIND® prime adaptable. Il trouve sa place même dans les espaces les plus réduits.

**Grâce à son absence d'empreinte au sol, X-MIND® prime ne diminue pas le précieux espace de travail disponible au sein de votre cabinet.**

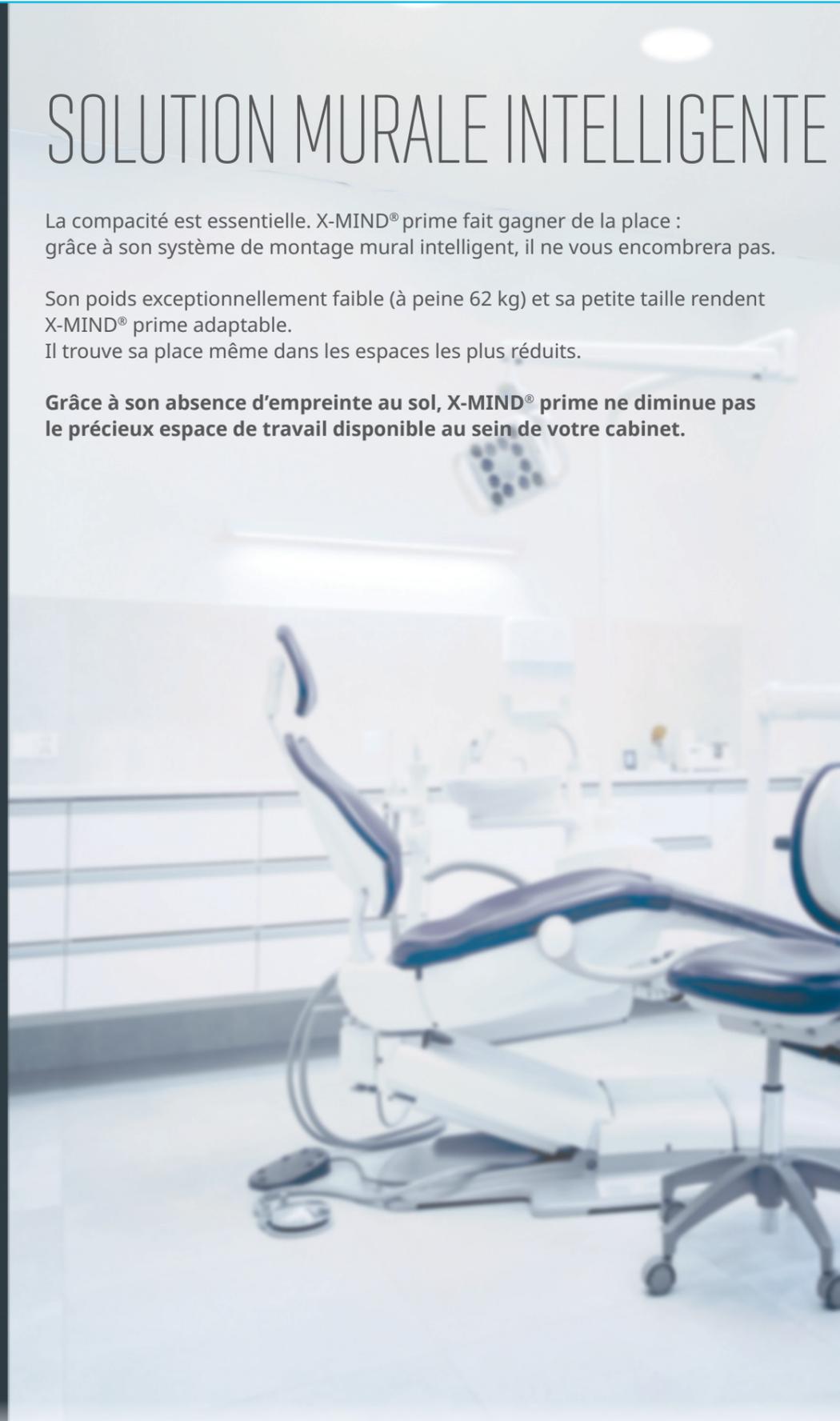


# POSITIONNEMENT SIMPLE ET EFFICACE DU PATIENT

Pour optimiser la productivité, X-MIND® prime a été spécifiquement conçu pour réduire le temps de préparation du patient.

## POSITIONNEMENT FACILE DU PATIENT

Positionnement face à face naturel facilité par les lasers d'alignement pour un positionnement correct du patient.

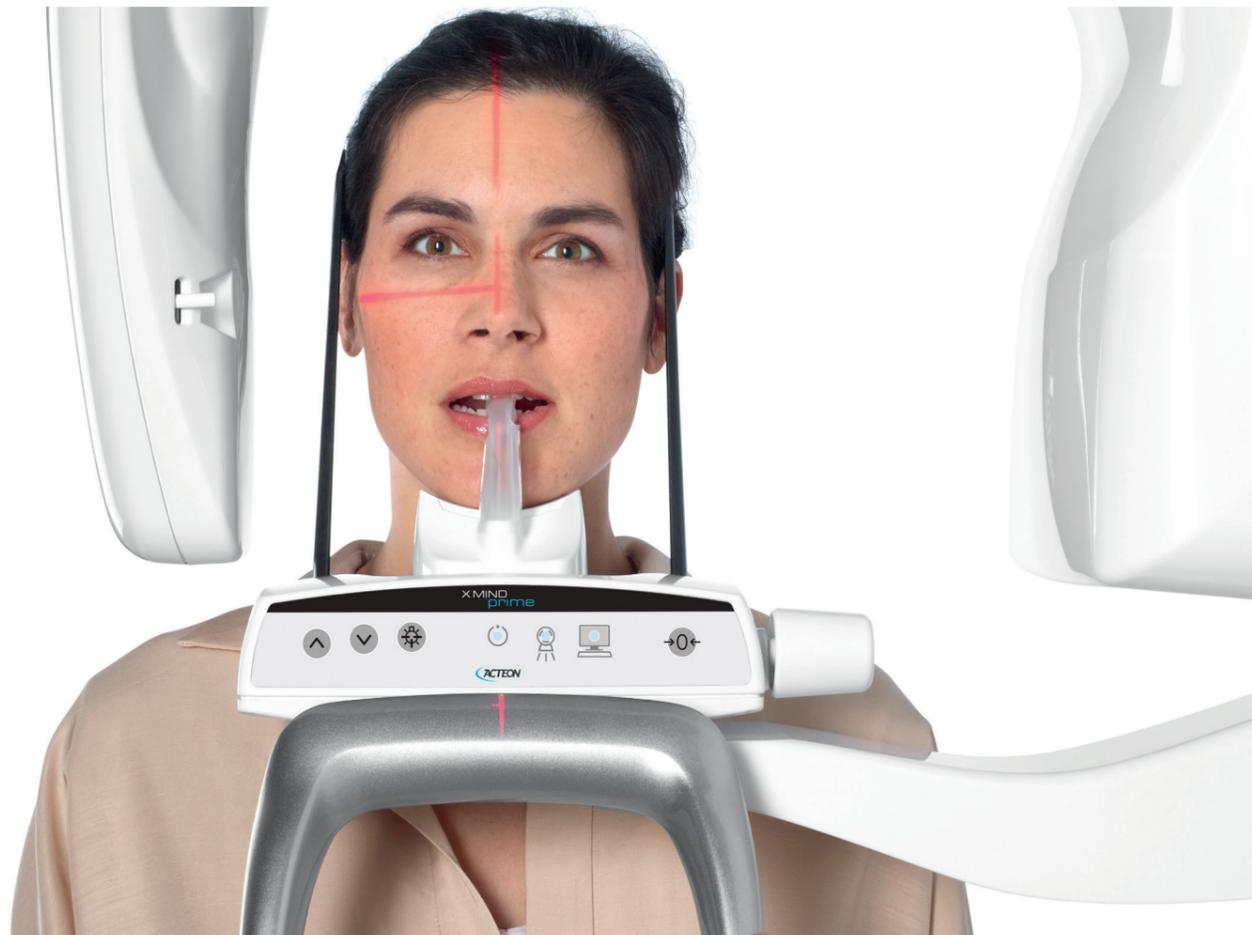

Grâce à ces bras télescopiques réglables via le panneau de commande, la hauteur s'ajustera au patient qu'il soit assis ou debout.

**La configuration ouverte de X-MIND® prime s'adapte à tous les types de patients et est aisément accessible aux fauteuils roulants en raison de son absence d'empreinte au sol.**

## PANNEAU DE COMMANDE SIMPLE


Le panneau de commande simplifié, intelligemment positionné sous le support mentonnier, assure un positionnement confortable et précis du patient. Un paramétrage simple et un temps d'examen rapide assurent une procédure plus productive.



Bénéficiez d'un positionnement sans erreur du patient grâce à la reconnaissance automatique du support mentonnier.



# DÉCOUVREZ LA TOUTE NOUVELLE VERSION AVEC BRAS


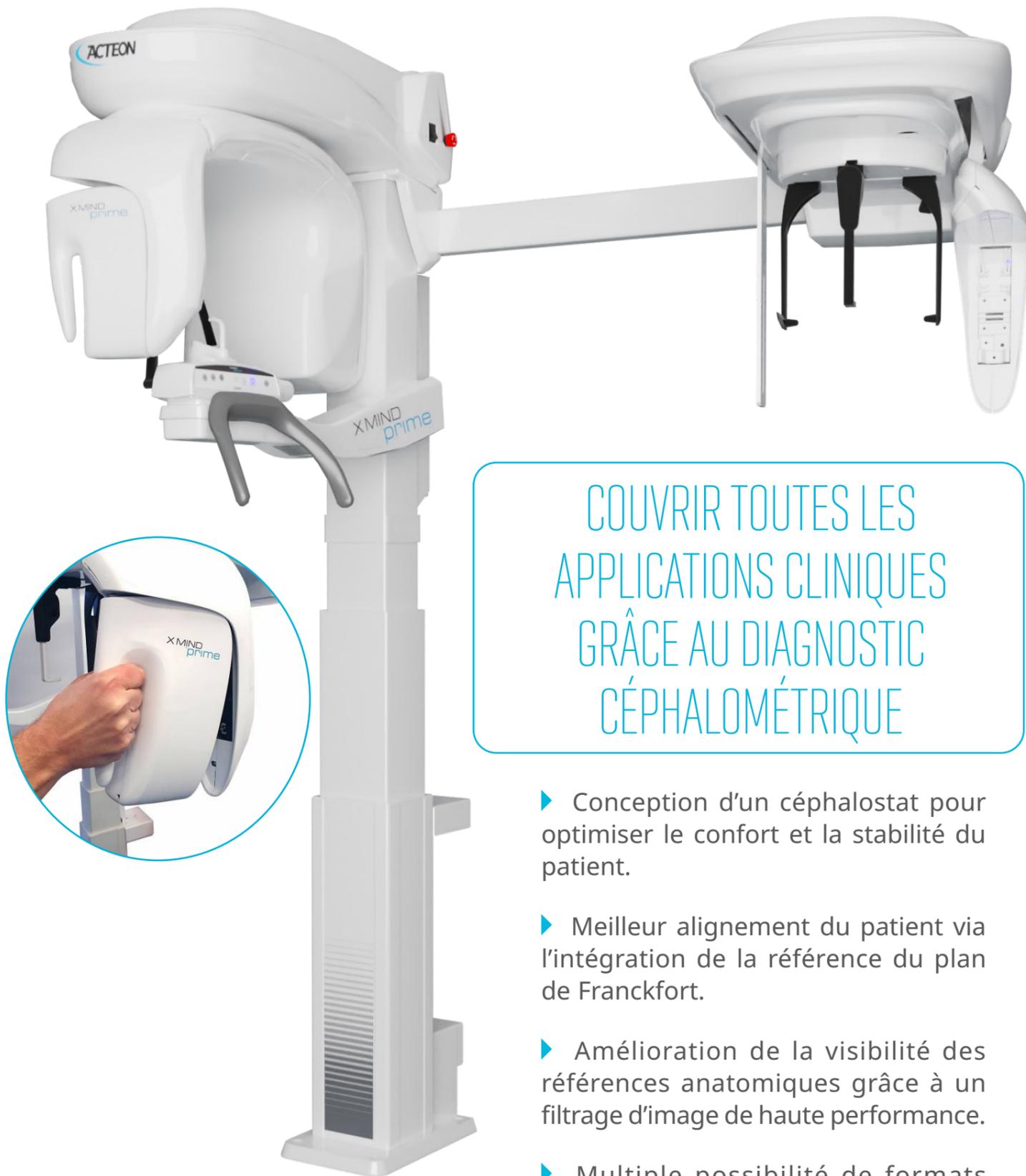


COUVRIR TOUTES LES  
APPLICATIONS CLINIQUES  
GRÂCE AU DIAGNOSTIC  
CÉPHALOMÉTRIQUE

- ▶ Conception d'un céphalostat pour optimiser le confort et la stabilité du patient.
- ▶ Meilleur alignement du patient via l'intégration de la référence du plan de Franckfort.
- ▶ Amélioration de la visibilité des références anatomiques grâce à un filtrage d'image de haute performance.
- ▶ Multiple possibilité de formats d'image et de modalités d'acquisition.

MANIPULATION DE CAPTEURS  
FACILE, FIABLE ET SÛR

Avec la nouvelle solution céphalométrique qui entre dans la gamme ACTEON® X-MIND® prime, vous pouvez désormais étendre les domaines d'application de l'appareil à l'analyse orthodontique, à l'amélioration du diagnostic et à la planification du traitement.

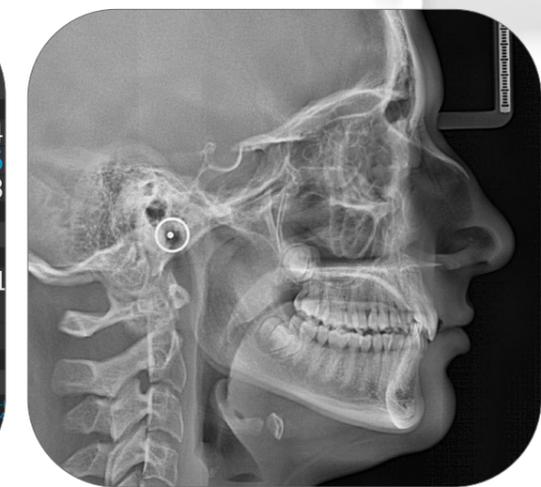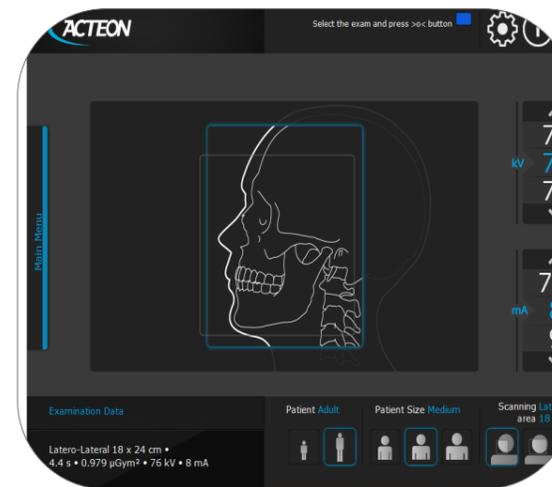

Son système de collimation breveté permet de sélectionner plusieurs tailles d'images, y compris de nouveaux modes de tailles réduites, garantissant une évaluation toujours parfaite de la région d'intérêt à la dose la plus faible. Le céphalostat a été conçu pour optimiser le confort et la stabilité du patient, tandis que le support de référence innovant, placé sur les olives auriculaires permet à l'utilisateur de toujours assurer un centrage parfait du plan de Franckfort.



# L'EXCELLENCE DANS VOTRE ANALYSE EN UN TEMPS RECORD


OPTIMISATION DU TEMPS  
D'ANALYSE GRÂCE À UN  
LOGICIEL PUISSANT, INTUITIF  
ET DE HAUTE PRÉCISION



## FONCTIONNALITÉS DE POINTE POUR UNE NAVIGATION INTUITIVE

Le logiciel Acteon Imaging Suite offre une navigation intuitive et des fonctionnalités de pointe. À lui seul, il permet la visualisation de tous les examens patient et de contrôler tous les dispositifs d'imagerie ACTEON\*.

- ▶ Mesure des distances et des angles
  - ▶ Rapport patient personnalisé
  - ▶ Conception de pointe
  - ▶ Lignes nettes
  - ▶ Manipulation facile
  - ▶ Conformité DICOM
- ▶ Architecture ouverte
  - ▶ Intégration harmonieuse avec les dispositifs d'imagerie 2D et 3D ACTEON\*
  - ▶ Filtre d'optimisation des détails sur les images panoramiques
  - ▶ Intégration avec différents logiciels de gestion des patients

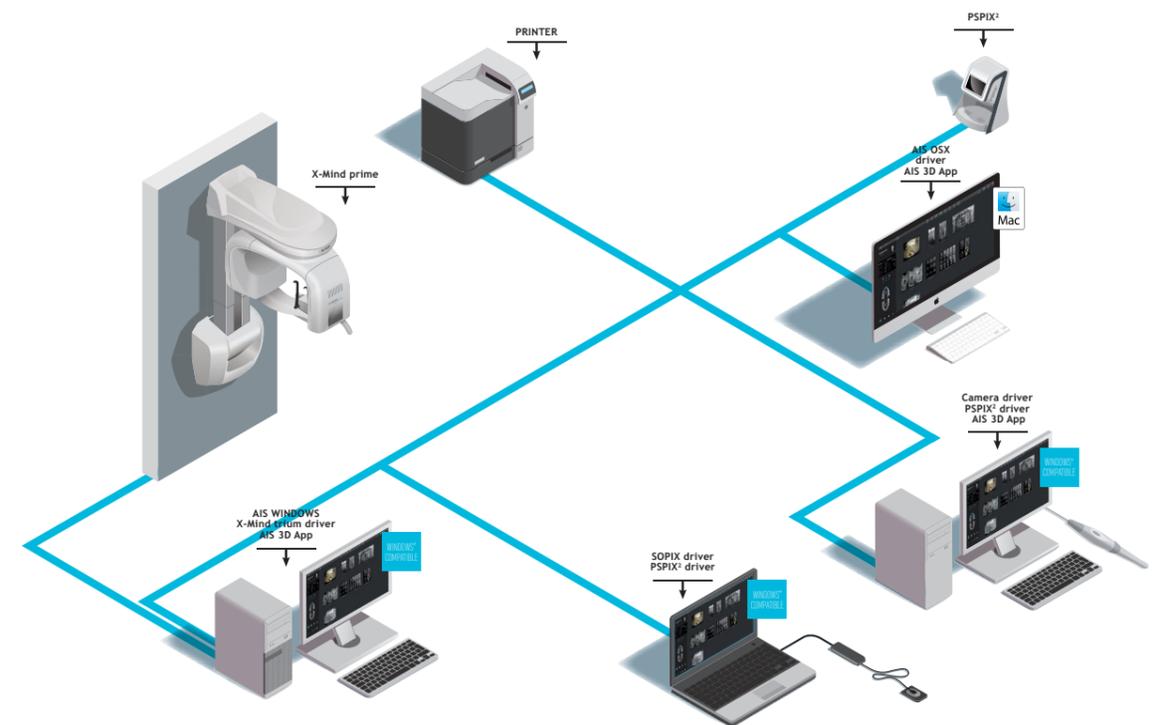

\*Acteon Imaging Suite

\*\*Acteon Imaging Suite n'est pas disponible avec les produits PSPIX2, la gamme SOPIX et les caméras intraorales ACTEON® Canada.

# DES SOLUTIONS POUR CHAQUE CABINET UNE RAPIDITÉ D'INSTALLATION INÉGALÉE

## CHOISISSEZ L'APPAREIL ADAPTÉ À VOS BESOINS CLINIQUES

- ▶ X-MIND® prime : Solution panoramique uniquement
- ▶ X-MIND® prime avec CEPH



X-Mind® prime

X-Mind® prime avec Ceph

Pan



Ceph




Également disponible en version murale.

● : Option disponible

X-MIND® prime est prêt à la mise en service ! Il est livré à votre cabinet entièrement assemblé, tout est complètement installé en à peine une heure.

**Une seule boîte, un technicien, deux étapes, c'est aussi simple que cela !**

Sa mise en service n'interrompt pas le travail quotidien et le fonctionnement du cabinet, ce qui contribue à vous faire gagner du temps.

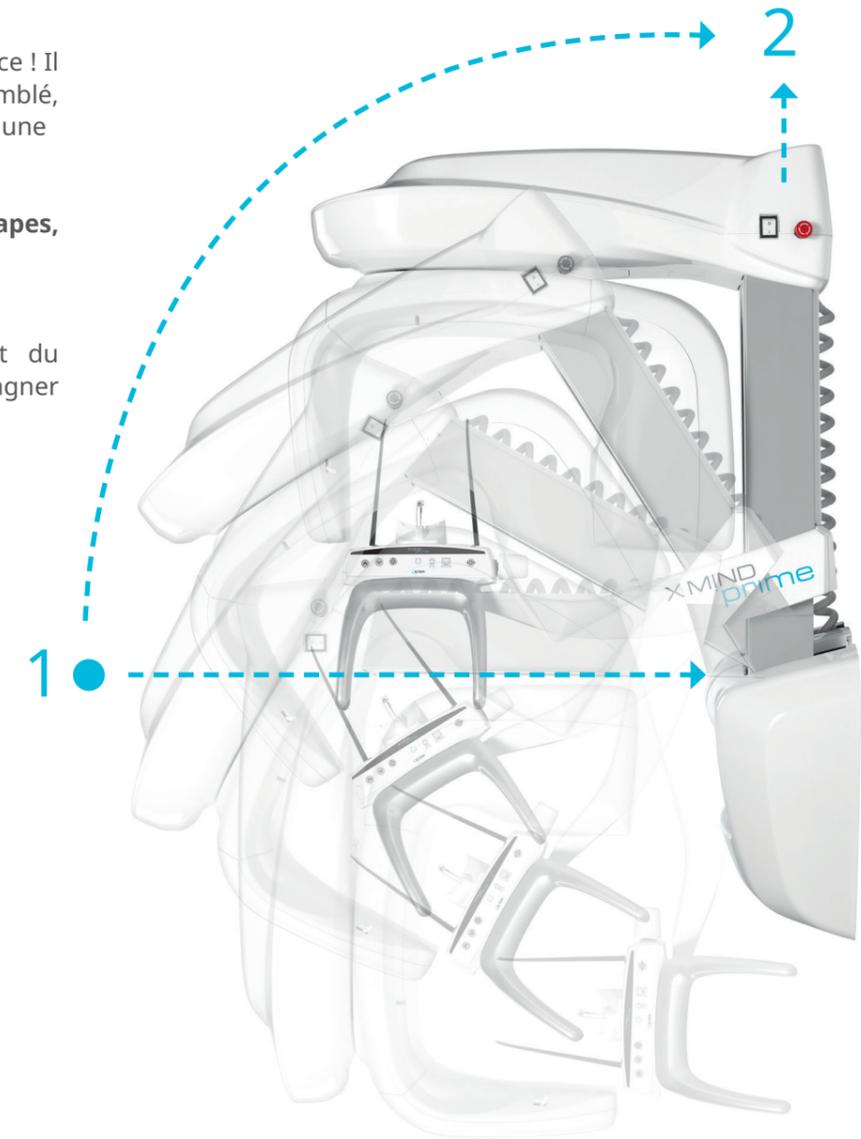

## LE SERVICE ACTEON | ET VOUS |

Des « Clinical trainers » sont disponibles pour vous montrer les aspects cliniques et les avantages pour le patient des produits ACTEON® et pour vous former à leur utilisation.

Service gratuit, permanent et illimité, accessible du lundi au vendredi, de 9h à 18 heures (HNEC).

ACTEON® peut également analyser et dépanner à distance, et nos techniciens spécialisés vous assurent un service sur le terrain aussi rapide que possible.

