

Catalogue général

OMS

Your Dental Unitness

OMS a plus de 60 années d'expérience et de connaissance dans le secteur dentaire, OMS est connue dans le monde entier par les opérateurs du secteur comme producteur innovant et fiable d'unités de soins dentaires pour les hôpitaux, les cliniques et cabinets dentaires privés. OMS est une combinaison entre la solidité d'une société à la pointe avec la flexibilité d'un atelier créatif : ses unités de soins dentaires sont conçues en utilisant des matériaux de tout premier choix, caractérisées par le design made in Italie avec des fonctionnalités ergonomiques les plus hautes. En outre, nous pouvons personnaliser les équipements, les fonctions, la couleur des skais de nos fauteuils. Pour toutes ces raisons, en choisissant OMS, votre unité de soins sera unique : Your Dental Unitness.

Index

Universal Top avec Moon ambidextre	20
Universal Top avec Moon	22
Universal Top avec repose-jambes repliable Moon	24
Universal Top avec cordons pendants (Drop)	26
Universal Top avec Kart	27
Carving Plus avec Moon	28
Carving	30
Carving avec cordons pendants (Drop)	32
Carving avec Kart	33
Universal Star	34
Universal Top avec Star	36
Carving avec Star	37
Virtuosus Plus 2020	38
Patavium Plus 2020	40
Esse Plus	42
Virtuosus 2020	44
Linea Patavium 2020	46
Linea Esse	48
Linea Esse avec cordons pendants (Drop)	50
Linea Esse avec Kart	52
Tempo 9 ELX	53
Punto Kart	54



Choisissez la configuration groupe hydrique/ fauteuil.

Le type de configuration groupe hydrique-fauteuil est la première, choix essentiel pour obtenir l'unité de soin dentaire la plus appropriée à vos besoins. OMS vous offre trois options : toutes avantageuses et simple à utiliser, chacune pour les différentes habitudes et nécessités de travail :



1

Groupe hydrique à colonne et fauteuil suspendu



2

Groupe hydrique à colonne et fauteuil à terre



3

Groupe hydrique mobile suspendu et fauteuil solidaire



1

Groupe hydrique à colonne et fauteuil suspendu.

Stabilité, hygiène, ergonomie. Le fauteuil suspendu a été projeté pour garantir la stabilité maximale parmi d'un assemblage équilibré au groupe hydrique à colonne. La base en acier est résistante à tout agent corrosif présent dans les produits pour le nettoyage. Extrêmement ergonomique, grâce au système de levage latéral, le fauteuil accompagne sans effort tout mouvement (changements de posture/position et ajustements de l'appuie-tête) et après le rinçage, permet de retourner à la dernière position de travail sans devoir ajuster à nouveau la lampe ou la tablette porte instruments. En outre, l'articulation (en option) au niveau des genoux (pliable en position chaise) rend encore plus pratique s'asseoir et se lever de votre fauteuil. Dentistes et assistantes peuvent exécuter les soins dentaires de la manière la plus confortable avec une vaste espace de manœuvre pour plusieurs opérations tels que orthodontie, soins dentaire et chirurgie.



2

Groupe hydrique à colonne et fauteuil à terre.


Extraordinaire stabilité pour garantir précision pendant le soin dentaire. Puisque le groupe hydrique à colonne et le fauteuil sont éléments indépendants, toute vibration est réduite au maximum. Cette configuration est idéale pour monter des instruments particulièrement sensibles au moindre mouvement, comme le microscope ou la lampe équipée d'une caméra. De plus, les deux points de connexion pour les tuyaux d'évacuation – sous la colonne ou sous le fauteuil – rendent l'installation de l'unité de soins encore plus facile et adaptable aux exigences et aux habitudes de travail de chaque cabinet.



3

Groupe hydrique mobile suspendu et fauteuil solidaire.

La configuration qui reflète le mieux la philosophie de travail de l'« école italienne ». Le dentiste peut ouvrir le groupe hydrique mobile jusqu'à 90°, en facilitant le travail de l'assistante. La position de rinçage peut être activée en tout moment, simplement en soulevant le dossier du fauteuil, sans autres mouvements. C'est la parfaite solution pour optimiser temps et organisation du travail de façon efficace, pour atteindre la satisfaction de l'équipe soignante et celle du patient.

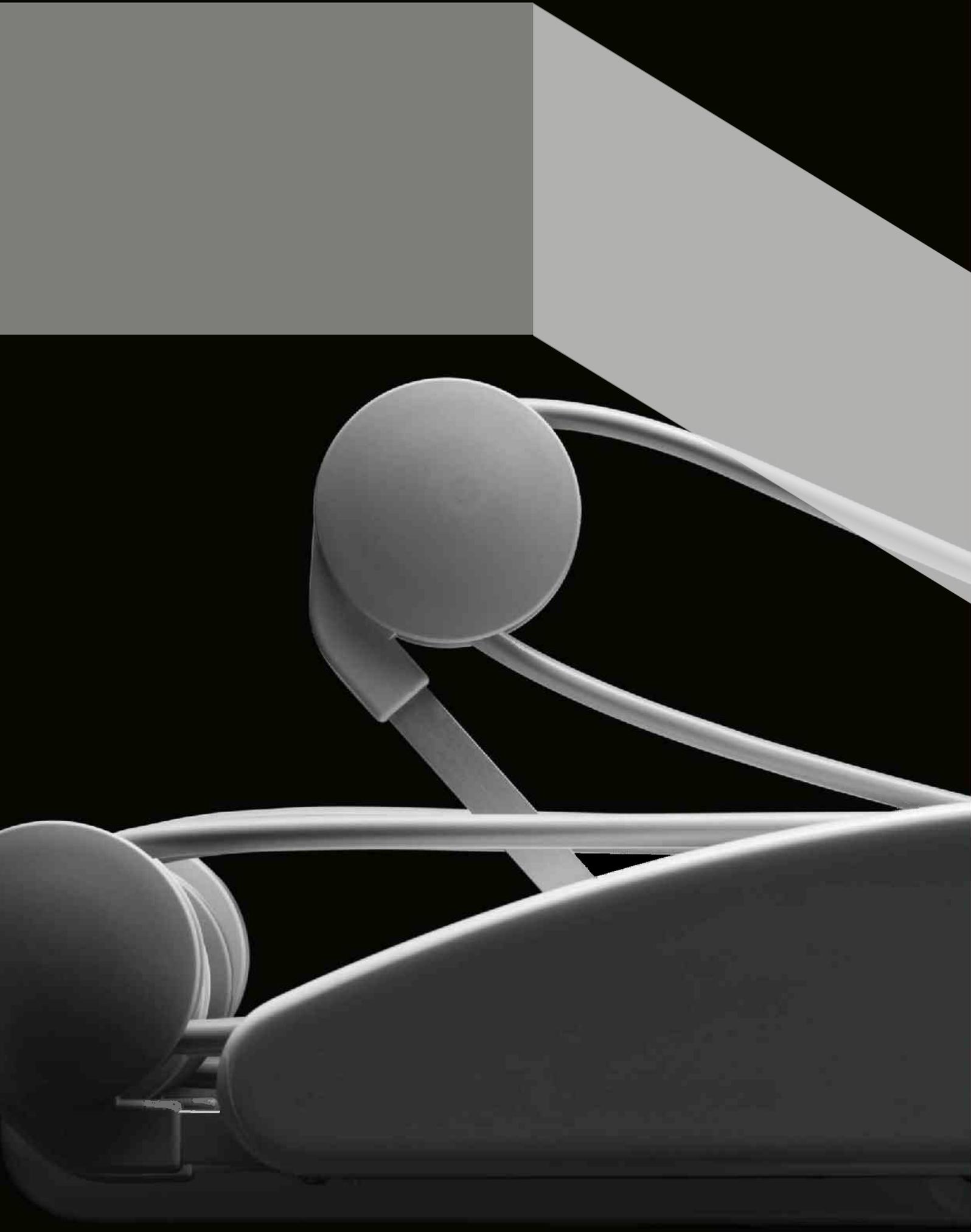

Organisez vos instruments OMS.

OMS vous permet de choisir comment gérer vos instruments en fonction de vos habitudes de travail et de l'espace à votre disposition et aux demandes de spécialisation:

La tablette praticien intégrée à l'unité de soins grâce à la disposition All-around, la tablette Star suspendue (suspendue au plafond avec lampe scialytique) ou Kart (avec chariot mobile)



All-Around

La tablette est intégrée à l'unité de soins avec technologie S.P.R.I.D.O., c'est-à-dire avec tuyaux flexibles très longs et escamotables ou avec cordons pendants.



Star

la tablette praticien avec suspension au plafond avec technologie La tablette est intégrée à l'unité de soins avec technologie S.P.R.I.D.O., c'est-à-dire avec tuyaux flexibles très longs et escamotables et/ou lampe scialytique.



Kart

la tablette praticien en céramique sur chariot mobile avec cordons pendants.



All-Around

**Tablette praticien intégrée
à l'unité de soins,
avec système S.P.R.I.D.O.
ou avec cordons pendants
(Drop).**

Le choix dépend des besoins du dentiste et de ses habitudes, ainsi que des exigences du cabinet et de sa configuration. Cette tablette peut être fournie avec clavier noir et blanc ou avec afficheur couleur, avec une ou deux poignées. En outre, la tablette peut être combinée à un plateau simple ou double.



Star

La tablette praticien suspendue au plafond est totalement ambidextre avec technologie S.P.R.I.D.O., c'est-à-dire avec tuyaux flexibles très longs et escamotables et/ou lampe scialytique.

Le dentiste, qu'il soit droitier ou gaucher, a plus d'espace d'intervention pour chaque type de traitement, l'environnement du cabinet joue un rôle essentiel en suscitant anxiété et peur chez le patient, cette tablette a l'avantage d'avoir un impact positif sur ses émotions et son attitude pendant le traitement : elle peut facilement revenir en arrière ou vers le haut, hors de sa vue.



Kart

Tablette praticien sur chariot mobile avec technologie Drop, c'est-à-dire avec cordons pendants.

Le chariot peut être équipé avec plusieurs instruments (détartreur, micromoteur, turbines) grâce à un large plan d'appui. Léger et compact, peut être déplacé sans aucun effort et positionné où l'on souhaite. Pour un cabinet rangé, cela permet un nettoyage avant-traitement soigneux et simple, avec un contrôle des infections efficace et sûr. Le chariot mobile Kart peut travailler de manière autonome (stand-alone) ou être connecté à l'unité dentaire.



Choisissez le confort pour vos patients !

Prenons le temps d'y réfléchir : chaque patient est différent. C'est pourquoi dans la conception et production d'un unit dentaire de qualité, OMS considère qu'il est fondamentale la réalisation d'un fauteuil ergonomique, qui s'adapte au corps et à la hauteur des attentes de chaque patient, en équilibrant facteurs clés comme : posture, support pour le dos, cou, tête.

Un traitement dentaire efficace dépend surtout du confort donné au patient. Swan, Moon et Arcadia EXT sont les fauteuils conçus pour un confort total qui peut soulager la douleur et prévenir le stress ou l'anxiété.



Swan

Un fauteuil robuste, caractérisé par une grande stabilité. Posé au sol, le fauteuil est ancré au groupe hydrique à colonne avec encombrement faible. Compensation du dossier de série et accoudoirs, pour un optimal support du bas de dos. Position Trendelenburg compris. Le fauteuil Swan est symétrique et peut être utilisé aussi bien par les droitiers que par les gauchers.



Moon

Fauteuil disponible dans les versions suivantes : cantilever, suspendu, sur sol, sur sol adapté au groupe hydrique mobile, suspendu. Disponible aussi en version solidaire avec connections air/eau extrêmement fonctionnelles. Moon peut être équipée avec deux accoudoirs (synchronisés avec le dossier), l'articulation au niveau des genoux (seulement dans la version cantilever, suspendu). Dossier pliable jusqu'à 90° en permettant la position assise droite. Design élégant et confortable, stabilité maximale et mouvements silencieux.



Arcadia EXT

Le châssis au-dessous de l'assise avec conformation « cubique » caractérise ce fauteuil original et performant. Suspendu ou adapté au groupe hydrique à colonne, peut bénéficier d'un dossier asymétrique, avec un espace dans la partie droite qui permet au dentiste de s'approcher de la cavité buccale du patient. Les connections air/eau sont positionnées horizontalement au-dessous du fauteuil, pour garantir un entretien facile et rapide.



Swan

La stabilité et fermeté de ce fauteuil, soit au sol soit assemblé au groupe hydrique à colonne, sont garanties par la robuste base en acier et par le sophistiqué système anti-écrasement. Grâce à son hauteur totale de 82 cm, Swan facilite la posture du dentiste pendant son travail assis ou debout. En outre, dans la partie postérieure du dossier, on trouve 9 mémoires programmables pour enregistrer 9 différentes configurations de travail. Le large dossier symétrique et le siège assurent une bonne et correcte posture même des patients les plus grands et à la structure corporelle plus robuste, sans risque de glissement. L'extraordinaire confort de Swan dérive aussi de son système de compensation, breveté par OMS, qui entre en fonction automatiquement quand le dossier est en mouvement (y compris la position Trendelenburg) et d'un confortable et pratique appuie-pieds pliable.

Swan est recommandé pour tout type d'intervention chirurgicale qui ne nécessite pas d'utiliser le groupe hydrique à colonne : pour exemple, opérations de cosmétique dentaire, exécutées par dentistes soit droitiers soit gauchers.



Moon

La versatilité et originalité de ce fauteuil sont évidentes dans les trois versions disponibles : fauteuil cantilever (suspendue), au sol, au sol assemblé au groupe hydrique mobile, suspendu. Dans chaque configuration, le pantographe au-dessous du dossier garantie repositionnements efficaces et silencieux, le fauteuil Moon s'adapte à tous les patients, même des personnes avec handicap (en utilisant la plateforme Libra* pour le positionnement du fauteuil roulant de la PMR), des enfants (grâce au set complet Ugo). Ce fauteuil peut être fourni avec les deux accoudoirs, synchronisés avec le dossier, ajustable jusqu'à 90° pour une assise droite. Il est disponible avec l'articulation (en option) au niveau des genoux (pliable en position chaise) avec la version cantilever, suspendue et, sur demande toutes les configurations peuvent avoir le skai super-memory. L'appuie-tête standard, avec double articulation ou bien 3D, permet un excellent support et confort du cou et de la tête. Le fauteuil Moon est conçu pour des traitements dentaires complets, de la prévention aux traitements pour restauration et reconstruction.



Arcadia EXT

La fermeté et fiabilité de ce fauteuil, soit au sol soit assemblé au groupe hydrique à colonne, sont évidents grâce au solide pantographe avec conformation « cubique » positionné au-dessous du dossier. Ce dernier est connecté à un dossier très fonctionnel, avec un profil arrondi dans la partie droite : une asymétrie qui permet des conditions de travail optimales, avec une approche thérapeutique du patient, comme le meilleur moyen d'accéder à la cavité buccale. En recréant un environnement ergonomique et sain, Arcadia Ext aide la prévention des désordres musculo-squelettiques du dentiste, avec la réduction du stress et plus de confort.

*Demandez la brochure dédiée à LIBRA ou visitez le site web www.omsdentalunits.it pour une description détaillée du produit.



Quel type de traitement proposez-vous ?

Le choix de l'unité dentaire la plus appropriée dépend de votre spécialisation, votre carrière professionnelle, expérience et, bien sûr, de vos attentes en termes d'excellence avec vos patients. C'est pourquoi OMS veut focaliser votre attention sur la configuration et l'ergonomie de la tablette praticien et de la tablette assistant : un choix soigné vous assure un utilise plus hygiénique et rapide des instruments et accessoires pour les différents types de traitement, comme orthodontie de prévention, curative et cosmétique.

Extrêmement importante aussi le système de contrôle utilisé pour le positionnement et ajustement du fauteuil, ainsi que le fonctionnement des instruments et les configurations pour le dossier, appuie-tête, accoudoir et appui-pieds, éléments essentiels pour garantir grand relax et confort des patients.

Que vous soyez à point d'ouvrir un nouveau cabinet dentaire ou que vous vouliez moderniser celui existant avec une nouvelle unité dentaire, OMS est à vos côtés avec les solutions les plus sophistiquées et à la pointe, pour répondre à vos besoins, même en termes de conception et personnalisation.

Préférez-vous la technologie S.P.R.I.D.O. ou cordons pendants ?



+

La tablette praticien OMS est équipée avec deux types de technologie : S.P.R.I.D.O. ou cordons pendants. Les unités de soins OMS peuvent être aménagées selon deux configurations de base :

- *4 instruments : seringue et trois instruments dynamiques
- *5 instruments : seringue et 4 instruments dynamiques

Quel est ton clavier préféré ?



+

La tablette praticien et la tablette assistant OMS sont disponibles avec un clavier à membrane et écran monochrome ou couleur. Également disponible dans la version avec commandes touch et écran intégré.

De quel type d'appuie tête avez-vous besoin ?



+

OMS Vous offre 3 types d'appuie tête très ergonomiques : standard, à double articulation (y compris dans la version avec déclic) avec deux confortables positionnements et 3D caractérisée par 3 mouvements pour garantir un confort maximal à tout type de patient.


De quel type de dossier nécessite votre traitement ?



+

OMS a projeté différents dossiers selon les exigences du traitement. En orthodontie, vous pouvez opter pour la version Long Moon, qui permet soit au dentiste soit à l'assistant de s'approcher ultérieurement à la cavité buccale du patient. Le dossier Standard Arcadia, au contraire est préférable en endodontie, car il y a une courbature à l'intérieure dans la partie droite : de cette façon, le dentiste peut rejoindre très facilement la cavité buccale. Large Moon Swan est utilisé pour la chirurgie dentaire qui nécessite plusieurs heures de traitement. La tapisserie super memory est disponible dans toutes les versions.

Voulez-vous plus de sécurité pour vous-même et vos patients ?

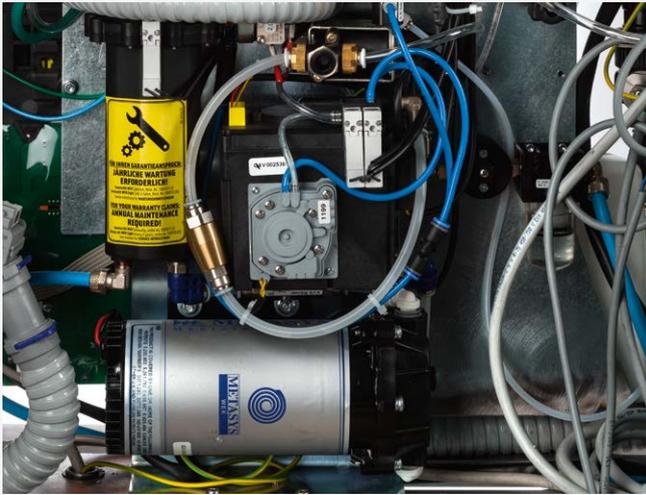

+

En équipant l'unité dentaire avec le dispositif optionnel WEK ou WEK Light, l'eau qui arrive aux instruments et au crachoir, est traitée avec peroxyde d'hydrogène pour éviter la formation des algues et de Légionellose à l'intérieur de l'unit dentaire et prévenir contaminations avec virus et bactérie.

Etes-vous à la recherche d'un design ergonomique en chaque détail ?



+

OMS vous offre un bras pour la tablette assistant très performant : le bras pantographé, se déplace dans toutes les directions sans aucun effort, en assurant fonctionnement stable, sans problèmes, avec la possibilité de travailler seul, si nécessaire.

Avez-vous besoin d'un extra support pour les tuyaux d'aspiration sur la tablette praticien ?



+

La tablette praticien peut être équipée avec un extra support pour héberger deux tuyaux d'aspiration supplémentaires. Cette option vous permet de travailler seul ou avec votre assistent. De toute façon, vous avez un accès rapide et facile aux instruments et aux canules d'aspiration.

Avez-vous pensé à la pédale ?



+

La pédale vous permet de déplacer le fauteuil et changer la puissance des instruments. En outre, on peut insérer le spray. Avec cette solution, les fonctions les plus utilisées sont toujours « à portée de pied ».





Une gamme complète, des solutions sur mesure.

Grâce à une connaissance technique développée en 60 ans d'expérience dans la production de matériel dentaire, OMS est en mesure de répondre à toutes les demandes spécifiques en identifiant l'unité dentaire la plus adaptée à votre cabinet dentaire, ainsi que de proposer des solutions hautement personnalisées, pour un environnement de travail ergonomique, caractérisé par l'efficacité et le confort. Après avoir considéré les trois éléments principaux qui composent un unit dentaire, le groupe hydrique, le fauteuil, la tablette praticien et le type de gestion des instruments disponibles (All-Around, Star, Kart), vous pouvez maintenant choisir le modèle d'unit dentaire qui correspond parfaitement à vos attentes.

N'oubliez pas que chaque produit peut être équipé d'une large gamme d'options supplémentaires pour personnaliser les fauteuils Swan, Moon et Arcadia EXT, telles que les têtières, les accoudoirs, les dossiers, la couleur du ski.

Virtuosus Plus 2020

Le nouveau Virtuosus Plus 2020 se présente avec un design complètement mis à jour et la configuration qui l'a rendu l'un des plus appréciés réunis OMS, synthèse parfaite de technologie avancée, design italien et principes d'ergonomie : le groupe hydrique à colonne avec crachoir en céramique orientable et amovible facile à utiliser peut être combiné à tous les modèles de fauteuil OMS sur le sol. La tablette praticien sur le bras instruments parfaitement équilibré peut accueillir jusqu'à 5 instruments avec technologie S.P.R.I.D.O., en garantissant une grande liberté de mouvement: sa forme symétrique permet d'effectuer facilement toutes les opérations. En outre les surfaces lisses, sans rainures, permettent un nettoyage rapide et efficace. La tablette assistant, sur le bras pantographe, loge 2 tubes d'aspiration plus 2 emplacements libres, avec plan d'appui confortable. L'unité dentaire peut également être équipée d'excellents systèmes de décontamination.



+

Tablette praticien ergonomique et symétrique, avec display et poignées amovibles et autoclavables



Group hydrique à colonne et chaise au sol



Tablette praticien All-Around avec S.P.R.I.D.O.



Fauteuil Arcadia EXT



Ergonomie et flexibilité absolues

+ Crachoir orientable vers le patient et démontable



+ Possibilité de configuration avec fauteuil spécifique pour vue frontale, prothèses et accès facile pour le patient



+ Tablette assistant ergonomique, avec commandes spécifiques et plan d'appui protégé



+ Technologie S.P.R.I.D.O. à faible encombrement en hauteur, bras instrument et long extension du cordon. Poignées amovibles et autoclavables



La société se réserve le droit d'apporter des modifications au produit présenté sans préavis.

O.M.S. spa - Ofcine Meccaniche Specializzate - Via Dante 20/A - 35030 Caselle di Selvazzano (PD) ITALIA
Tel. +39 049 8976455 - Fax +39 049 8975566 - www.omsdentalunits.com - info@omsdentalunits.com