

PRECISION TECH

VACSTATION

Votre sécurité, et celle de vos patients est essentielle.

NOUVEAU

Un système d'aspiration du champs opératoire avec plusieurs filtrages de niveau innovant

Le système de filtre HEPA H13 capture les virus, les bactéries et les matières organiques de taille $\geq 0,3$ sortant avec une efficacité garantie de 99,97 %.



système d'aspiration extra-orale volume élevé combiné à la lumière uvc



Un système de filtrage à plusieurs niveaux innovant

Le système de filtre HEPA H13 capture les virus, les bactéries et les matières organiques de taille $\geq 0,3$ avec une efficacité garantie de 99,97 %.



Processus d'assainissement garanti

L'air aspiré à travers le système de filtrage est soumis à l'action désinfectante de la lumière UV-C, ce qui garantit un processus d'assainissement complet et sûr.



Action de filtrage multiple

Une structure complexe de filtres (filtre en coton, filtre en fibre de verre, avec charbon actif, KMnO₄ et particules céramisées) permet de capturer les aérosols et les poussières en assurant l'absorption, la stérilisation et la filtration.


Moteur sans balais

L'absence de balais dans le moteur garantit une puissance plus élevée et une durée de vie plus longue, ce qui se traduit par une réduction des niveaux de bruit.



Action définitive de la lumière UV-C

Dans la dernière étape du processus, la lampe UV-C, d'une intensité de 1210 w/cm² et d'une longueur d'onde de 280 nm, dégrade les acides nucléiques et élimine définitivement tous les agents pathogènes.

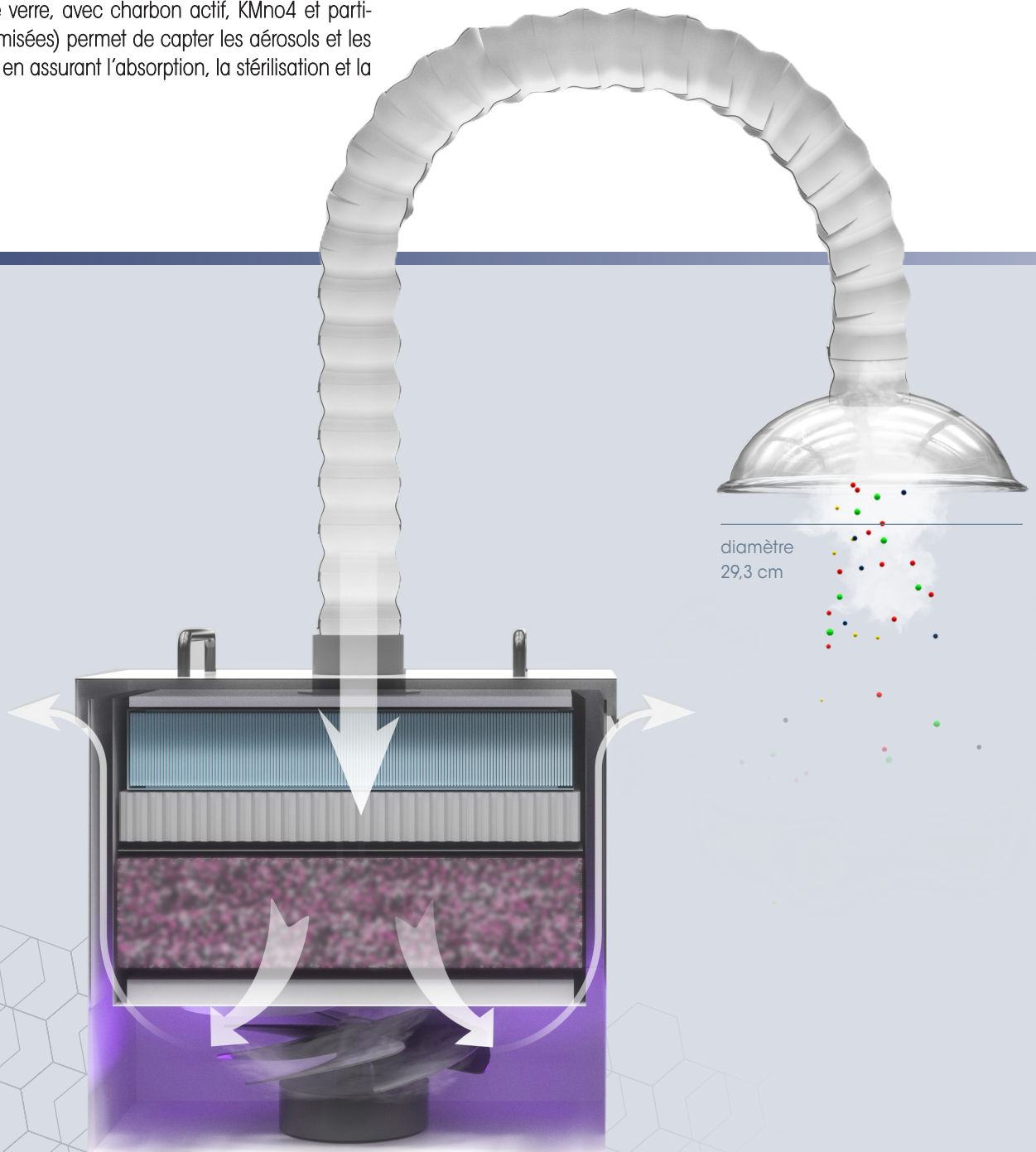

VACSTATION

Système d'aspiration extra-orale

Puissant
Sûr
Fonctionnel

L'aérosol qui est produit dans le fauteuil dentaire pendant les procédures dentaires est très dangereux tant pour les opérateurs que pour les patients eux-mêmes, car il est un véhicule de virus et de bactéries nocifs. Limiter sa diffusion avec un système d'aspiration garanti permet de travailler en toute sécurité. VacStation a été spécialement conçue pour répondre aux besoins du cabinet dentaire de manière ponctuelle et efficace: puissante, fonctionnelle et transportable.

VacStation est un dispositif médical certifié de classe I conformément à la directive européenne européenne 93/42/CE.



VACSTATION

Système d'aspiration extra-orale



LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	VacStation
Tension	AC220V/50Hz
Puissance	250W Max
Puissance maximale aspiration	3000Pa (10 niveaux réglables)
Volume maximal	3.7 m ³ / Min
Bruit en décibels	62 db
Poids	21 kg
Dimensions	70x34x65 cm

VACSTATION - Code: VACSTATION

- Unité de base
- Tube ondulé
- Cône d'aspiration

Créé en exclusive pour



PRECISION TECH est une marque de:
DENTALICA S.p.A. - Via Rimini, 22 - 20142 Milano
info@dentalica.com - www.dentalica.com
Tel : +33 6 72 26 18 43