


Le VistaScan Mini Easy compact et simple

Leader sur le marché avec la technologie PCS brevetée

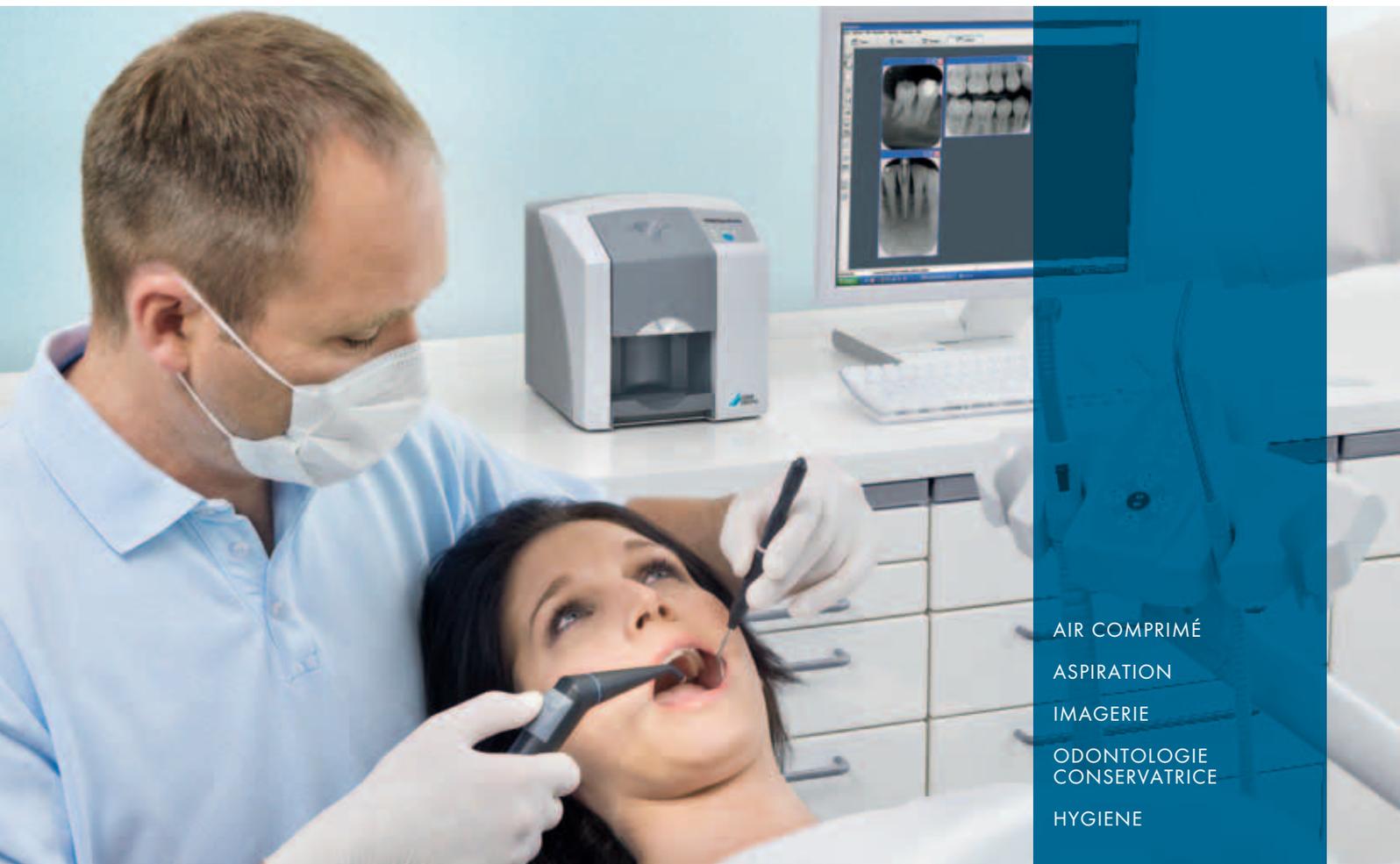

AIR COMPRIMÉ
ASPIRATION
IMAGERIE
ODONTOLOGIE
CONSERVATRICE
HYGIENE

VistaScan Mini Easy – compact et simple


VistaScan Mini Easy simplifie l'imagerie du cabinet, grâce à une technologie brevetée et une qualité d'image hors norme des scanners pour écrans à mémoire de Dürr Dental.

Made in Germany.




Le scanner pour écrans à mémoire VistaScan Mini Easy

Depuis l'introduction des films argentiques conventionnels en chirurgie dentaire, Dürr Dental a été leader en matière d'aide au diagnostic. Le numérique avec Dürr Dental offre aux dentistes des images en haute résolution pour répondre à toutes les demandes. Plus de 40 ans d'expérience dans le développement de la technologie à rayons-x ont conduit à des résultats innovants et parfaitement adaptés aux pratiques des cabinets. Le scanner pour écrans à mémoire VistaScan Mini Easy produit des images diagnostiques encore plus rapidement. L'équipement compact est particulièrement simple à utiliser et requiert un minimum de place – on peut l'installer directement dans la salle de soin. L'avantage : on peut prendre les clichés et obtenir les résultats près du fauteuil. Les écrans à mémoire VistaScan peuvent être scannés en excellente qualité en quelques secondes. C'est le meilleur moment pour passer aux écrans à mémoire.

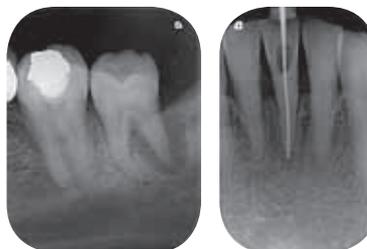

Images en haute résolution, un appareil silencieux, un diagnostic sûr

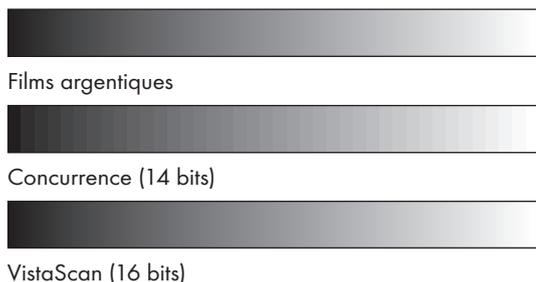

La graduation des niveaux de gris des écrans du VistaScan offre une image aussi précise que les films

Écrans à mémoire Mieux que les Capteurs !*



Tailles habituelles

Le Vista Scan Mini Easy peut lire des écrans de taille 0 et 2, et la surface est utilisée à 100%. Manipulation simple – comme celle d'un film argentique.

*Une étude comparative de la qualité d'image et de l'exposition aux radiations pour produits de radiographies dentaires utilisant un dispositif à transfert de charges (CCE) et un système avec écrans à phosphore. School of Dentistry, Cardiff University, 2009




Points importants :


- Images rapidement disponibles
- Compact
- Utilisation près du fauteuil
- Concept opératoire sophistiqué
- Liaison avec le PC via USB
- Image de haute qualité
- Tailles intra-orales habituelles

Diagnostic plus rapide et plus sûr

Le procédé d'exposition reste le même que celui d'un film argentique. En revanche, la fiabilité du diagnostic croît grâce à une meilleure reconnaissance des détails et à un support logiciel sophistiqué. Avec le VistaScan Mini Easy, vous bénéficiez de tous les avantages de la technologie des écrans à mémoire de Dür Dental sous une forme ultra compacte. Les écrans à mémoires fins et flexibles sont plus confortables pour le patient et sont particulièrement résistants grâce à leur revêtement spécial. Le logiciel DBSWIN imaging donne des résultats d'une excellente qualité et permet un travail ergonomique. Le VistaScan Mini Easy peut être utilisé avec la plupart des logiciels d'imagerie dentaire standard.

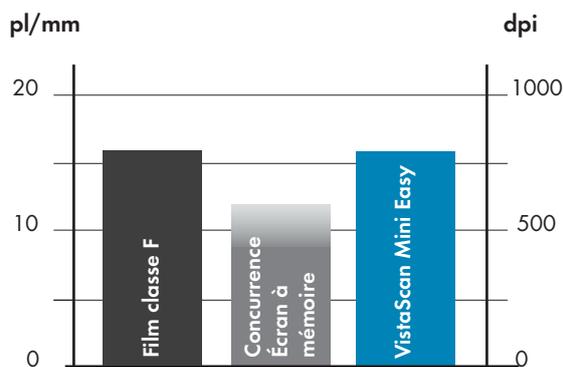

Comparaison de la résolution des systèmes à rayons x : Le système VistaScan de Dür Dental obtient la meilleure résolution par rapport à ses concurrents. Les dernières études montrent que seule la technologie des écrans à mémoire permet une numérisation sans compromis.

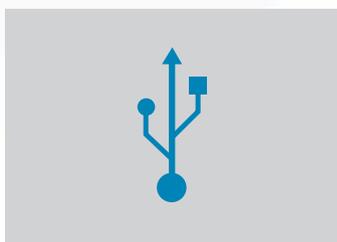

Manipulation facile

Numériser, effacer, se préparer pour la prochaine étape en un circuit. Image disponible en 6 secondes, à proximité du patient.

Intégration facile

VistaScan Mini Easy peut s'utiliser avec DBSWIN ou tout autre logiciel via des plug-ins ou des pilotes Twain. Il peut facilement s'intégrer au réseau du cabinet via l'USB.

Données, faits et accessoires

VistaScan Mini Easy	
Taille des écrans	0 (2 x 3 cm) + 2 (3 x 4 cm)
Résolution effective (pl/mm)	16,6 (850 dpi)
Poids (kg)	6,5
Dimensions (H x L x P mm)	226 x 234 x 243
Fonction de veille	Oui
Interfaces	USB



Système d'angulateurs pour écrans à mémoire

Grâce à leurs bords arrondis, les angulateurs de Dürr Dental offrent une excellente protection aux écrans. Les angulateurs sont disponibles pour tous les champs d'application et contribuent à faire de bonnes radios.



Désinfection au FD 350

Les lingettes de désinfection FD 350 de Dürr Dental conviennent tout particulièrement à la désinfection et au nettoyage des produits médicaux. Grâce à leur taille, elles sont idéales et économiques pour les petites surfaces et objets, les sachets d'écrans, les pièces à main et les embouts, etc. - prêtes à l'emploi, rapides, elles ne laissent pas de traces.



Lingette de nettoyage des écrans à mémoire

Les lingettes de nettoyage des écrans à mémoire du VistaScan ont aussi un effet désinfectant. Résultat : une plus longue durée de vie des écrans à mémoire.