





**UnicLine<sup>®</sup>**

La flexibilité et le design  
personnel de votre unit  
en font un partenaire actif



2



La qualite n'est  
pas une question  
de consideration  
La qualite est  
une solution




3

## Commande complete - avec les pieds

Pour toutes les fonctions, il est possible d'activer la pédale ronde - un concept unique et patenté et ce dans n'importe quelle position soit du pied droit soit du pied gauche, ce qui ne vous limite pas à une seule position de travail. Elle règle la vitesse et l'intensité de l'instrument choisi.

En touchant l'anneau qui se trouve au milieu de la pédale au pied, vous activez la fonction spray et le chip-blow mécanique; de la même façon, vous changez le sens de rotation du micromoteur.


En poussant sur la face supérieure de la pédale ronde, vous vous servez du scialytique ou vous appelez votre assistante.

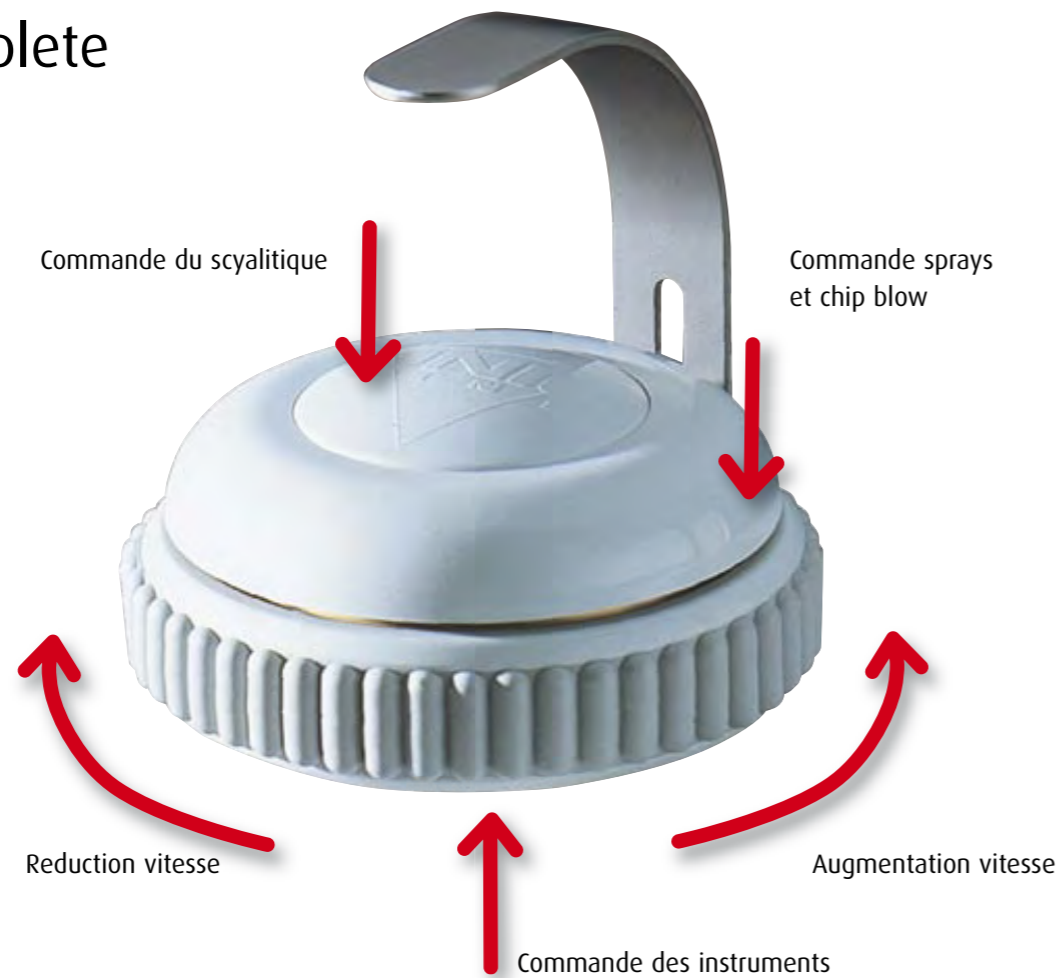

UnicLine 5D kan også leveres med en konventionel variabel fodkontrol.



## Laissez les possibilites ouvertes tous les jours

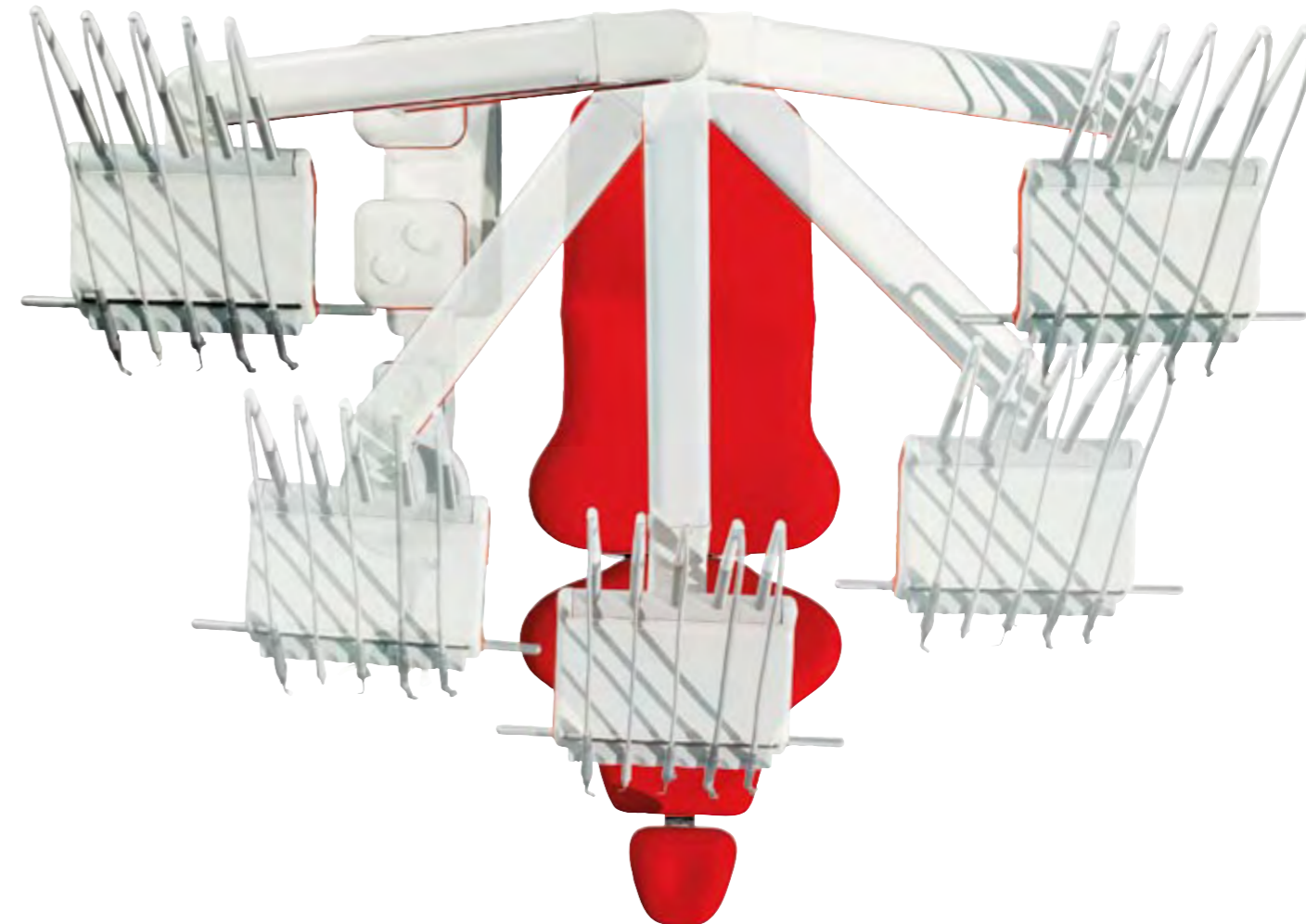





**Un afficheur**  
indique les fonctions en cours des différents instruments: spray, vitesse moteur, puissance détartreur, etc.

**Une gamme étendue de possibilités**  
L'UnicLine 5 D est livrable avec 3 à 6 fouets ou avec 3 à 6 cordons suspendus, positionnés individuellement sur la tablette instruments de l'unit. Vous avez le choix entre une vingtaine de modules différents qui sont tous activés par la pédale au pied.

**Réglage individuel**  
L'amplitude de l'angle du carquois porte-instrument peut être ajusté individuellement pour chaque instrument.

**Du bout des doigts**  
Les boutons poussoirs qui se trouvent du côté latéral de la tablette unit contrôlent la durée des temps de polymérisation de la lampe à polymériser, l'appel de l'assistante et les fonctions du crachoir.



**Ergonomie**  
Sur la version avec fouets, chaque instrument est en parfait équilibre et la longueur des tuyaux en silicone assure des positions de travail ergonomiques.

Chacun d'entre nous a ses propres idées et desideratas. Flexibilité signifie entre autre adaptation. C'est pourquoi nos units peuvent être adaptés aux besoins et aux désirs de chaque dentiste





Les poignées en aluminium s'enlèvent et sont autoclavables.



Le support des instruments en caoutchouc s'enlève et se nettoie facilement.




**Rinçage automatique des spray**

Pour assurer l'alimentation de l'eau fraîche l'unit UniclLine 5D peut être équipé du rinçage automatique des spray.

**Vidange de la canalisation**

UniclLine 5D peut être livré avec le système de vidange de la canalisation d'eau hygiénique pour réduire la croissance des algues.

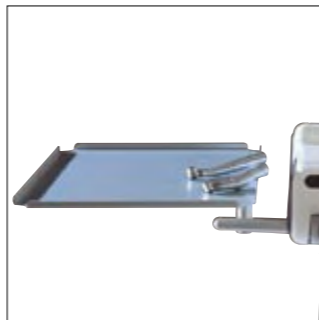

**UniclLine 5D**

- avec plateau simple.
- avec plateau double.

Pourquoi faire des compromis en ce qui concerne les matériaux, si on peut choisir un équipement en aluminium - la certitude d'une fiabilité à toute épreuve



**UnicLine multimédia**  
UnicLine 5D avec  
écran intégré pour  
RVG camera  
et presentations  
multimédias.



Flexibilité signifie  
également adaptation



10



11





12

UnicLine 5D  
- un concept elegant  
et fonctionnel  
respectant  
l'environnement



13





14

Unic Line 5D  
peut s'adapter  
pour une  
utilisation  
a droite ou  
a gauche



15



## Scialytique stable



Le scialytique UnicLine monté sur un bras auto-équilibrant à ressort assure une lumière chirurgicale sûre et stable.

16

## Positionnement libre

### UnicLine Cart

La version Cart assure les mêmes fonctions que l'unité l'UnicLine 5D et est montée sur une base en aluminium très stable reposant sur des roulettes invisibles.

La hauteur de travail du porte-instruments est ajustable manuellement pour le travail assis ou le travail debout.



UnicLine Cart



### Crachoir

Le crachoir peut être fixé au fauteuil et être équipé d'une aspiration, d'un plateau supplémentaire, d'un scialytique et d'un bras télescopique.



UnicLine sur colonne

17



# Hygiene pour le patient


L'UnicLine 5D est disponible avec un système unique de nettoyage des tuyaux d'aspiration, activé par un bouton poussoir. De cette façon les tuyaux de l'aspiration sont désinfectés ce qui permet le traitement immédiat du patient suivant. Une désinfection continue des tuyaux de l'aspiration est possible durant le traitement du patient.



L'UnicLine 5D est livré soit avec des canules d'aspiration réglables soit avec des canules d'aspiration hygiéniques en aluminium.

# Flexibilité

L'UnicLine 5D est livré avec un bras télescopique flexible réglable pour obtenir une position de travail idéale, et ce aussi bien pour le travail avec ou sans assistante. Le bras télescopique peut recevoir en option une seringue multifonctions ou une lampe à polymériser.

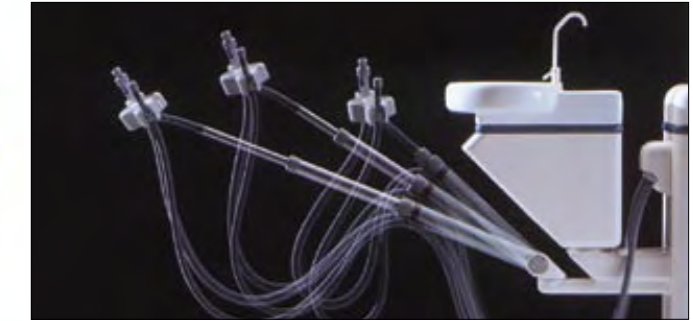

# Confort

Le crachoir tournant peut être manipulé facilement par une ou deux assistantes. Le crachoir se démonte facilement pour le nettoyage.







### Les accoudoirs

En option le fauteuil UnicLine est livrable avec un ou deux accoudoirs amovibles.



### Joystick

Jusqu'à 3 commandes au pied peuvent être positionnées individuellement, ce qui assure une position de travail idéale pour vous et votre assistante.



### Facile à nettoyer

Le skai UnicLine est facile à démonter pour nettoyage.



Toute une gamme de possibilités

Le fauteuil patient UnicLine est livré avec un recouvrement "Soft" en 9 couleurs standards différentes et en option avec un recouvrement "SuperSoft" de 4 couleurs différentes.


## Confort du patient

Les mouvements compensés du dossier et du siège et l'accoudoir intégré assurent au patient une position confortable durant le traitement.



### Position stable

La tête à double articulation corrige le positionnement du patient adulte ou enfant.

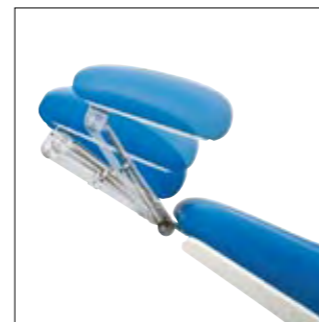



## UnicLine Mobile

Complètement équipé pour traitement mobile et stationnaire.

UnicLine "Autonome" Compresseur, aspiration, récupérateur d'amalgame, réservoir d'eau propre, réservoir d'eau usée. 230 VAC suffisent pour faire fonctionner cet unit.



## UnicLine Mobile avec radio

# heka*dental*<sup>®</sup>



Heka Dental A/S  
Baldershøj 38  
DK-2635 Ishøj, Denmark  
Phone +45 4332 0990  
Fax +45 4332 0980  
mail@heka-dental.dk  
www.heka-dental.com

Kommunikator 23735 9/08 FR

## **Futur**

Pour tous renseignements consulter Heka Dental A/S ou votre concessionnaire.

Photos non contractuelles.



